

## Überprüfung der Effizienz von Reinigungsprozessen


### Riboflavin-, Partikel- und LAL-Tests für pharmazeutische Reinigungsmaschinen

Die Überprüfung der Reinigungseffizienz, auch im Zuge von Requalifizierungsaktivitäten, kann, abhängig von der Fragestellung, auf verschiedenen Wegen erfolgen.

Während der semi-quantitative Riboflavin Test unter UV-Licht sofort Ergebnisse liefert, müssen die quantitativen, instrumentell anspruchsvolleren Bestimmungen von Partikelzahlen und Endotoxinkonzentrationen im Labor durchgeführt werden.

Der Partikeltest verwendet zur Beaufschlagung zertifiziertes, lagerungsstabiles Glaspulver der Partikelgröße 10 µm. Für den LAL-Test werden die Objekte mit zertifizierten Lipopolysacchariden (LPS, Endotoxin) beimpft.

Valicare liefert die notwendige GMP-konforme Dokumentation, wie Protokolle, Prüfdokumente und Berichte.

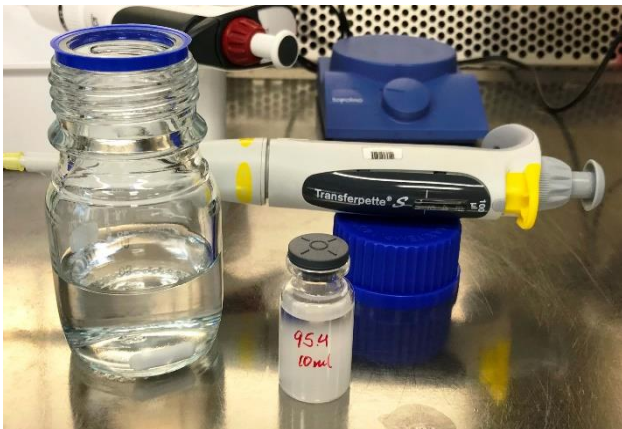

### Unsere Dienstleistungen

- Vorbereitung der Testobjekte (Beaufschlagung mit Riboflavin, Partikeln oder Endotoxin)
- Maschinenläufe vor Ort
- Auswertung des Riboflavintests vor Ort
- Messung der behandelten Testobjekte, Bestimmung der Wiederfindung (bei Partikel- und LAL-Tests), Auswertung
- Erstellung GMP-konformer Dokumente
- Messungen mit qualifizierten/kalibrierten Analysegeräten

### Unsere Kompetenz

- Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Durchführung von Reinigungseffizienztests
- Multidisziplinäre Ingenieure mit technischem Know-how
- Naturwissenschaftler mit analytischem Fachwissen und Laborerfahrung

### Ihre Vorteile

- Personelle Entlastung und Zeitgewinn durch Vergabe der Tests an Experten
- Aussagekräftige und reproduzierbare Ergebnisse durch Anwendung SOP-basierter und kompetent ausgeführter Methoden und Laboranalysen
- GMP- und audit-gerechte Dokumentation



UV-Fluoreszenz von Lösungen mit unterschiedlichen Konzentrationen an Riboflavin.

**Sprechen Sie uns an, wenn Sie Tests zur Überprüfung der Effizienz Ihrer Reinigungsmaschine planen. Wir unterstützen Sie!**



**Dr. E. Sons-Brinkmann**  
Business Development & Marketing  
Telefon +49 69 153 293 709  
Mobil +49 172 413 0603  
[Ellen.Sons-Brinkmann@valicare.com](mailto:Ellen.Sons-Brinkmann@valicare.com)



**I. Köse**  
Teamleiter Validierung  
Telefon +49 7951 402 1421  
Mobil +49 162 603 470 4  
[ilker.koese@syntegon.com](mailto:ilker.koese@syntegon.com)

Valicare GmbH  
Eschborner Landstr. 130-132  
60489 Frankfurt, Germany

Tel: +49 69 153 293 700  
[info@valicare.com](mailto:info@valicare.com)  
[www.valicare.com](http://www.valicare.com)